

Lifeline **VIEW**



Defibtech Lifeline VIEW

- Avansert teknologi • Proffesjonell kapasitet
- Prisvinnende design • Robust og holdbar
- Lett å vedlikeholde • Enkel og forklarende i bruk
- Fullt ut konfigurierbar • Følger norske guidelines
- Norsk språk • Halvautomatisk

Hjertestarter med videoinstruksjon

Ikke vær redd

Hjertestarteren Lifeline VIEW fra USA gjør det enkelt for alle, fra etablerte "first respondere" til utrente forbigående å respondere med trygghet og korrekthet under en hendelse.

Den første og eneste hjertestarter i markedet med en interaktiv fargeskjerm som viser steg-for-steg videoer for hjerte-lungeredning og ekstern defibrillering.

Denne revolusjonerende livreddende enheten kombinerer en elegant og brukervennlig design med tøffe spesifikasjoner tilpasset for bruk i det Amerikanske Forsvaret.

Med sin bifasiske bølgeform tilfredstiller den alle de virksomhetskritiske funksjoner som er nødvendige for å gi den mest avanserte hjertestansbehandling, og den følger selvfølgelig anbefalingene fra Norsk Gjenopplivningsråd.

Du kan være trygg på at enheten er lett å vedlikeholde og alltid klar for bruk. I tillegg er den designet for å enkelt kunne oppdatere og oppgradere forbedringer i årene som kommer.



Klar for redning

Når en hjertestans plutselig inntreffer må du til enhver tid være trygg på at hjertestarteren er klar til bruk. Lifeline VIEW kjører omfattende selvtester daglig for å sikre at maskinen fungerer skikkelig og viser deg dette umiddelbart med et sterkt grønt, blinkende lys fra lysdioden. De fleste andre hjertestartere signaliserer kun når det er et problem og overlater til brukeren å søke etter viktige biter av feilinformasjon. Lifeline VIEW er annerledes. Med et trykk på en knapp, og uten å slå på selve enheten, kan brukeren raskt sjekke at hjertestarteren er klar for bruk. Maskinen kommuniserer umiddelbart den operative statusen på hjertestarteren, batteriet og elektrodene.



Viser og forteller deg



Andre hjertestartere forteller deg hva du skal gjøre. Lifeline VIEW viser deg, med detaljerte interaktive videoer i fullfarge. På skjermen fremkommer det forklarende tekst simultant med den interaktive videoen og stemmeinstruksjoner. Dette forsterker instruksjonene, samt gjør det enkelt og nyttig i miljøer med mye støy der stemmemeldinger er vanskelig å høre.



En personlig instruktør




Å bruke Lifeline VIEW er som å ha en personlig instruktør ved din side. Den viser deg en video av hvordan du skal bruke hjertestarteren, fra å forberede pasienten, åpning og tilkobling av elektrodene til levering av strømstøtene. Den veileder deg også igjennom alle trinn for effektiv hjerte-lung-eredning (HLR) med innblåsninger. Den kan også vise deg oppgavene så mange ganger du har behov for, slik at du er absolutt trygg på alle handlinger du skal utføre.

Lett vedlikehold



Vedlikehold har aldri vært enklere. Lifeline VIEW har revolusjonert vedlikehold av hjertestartere. Den selvtester daglig alle maskinens funksjoner. Ved kontroll og bytte av batteri og elektroder, vil du få klare instruksjoner i form av tale og videomeldinger.

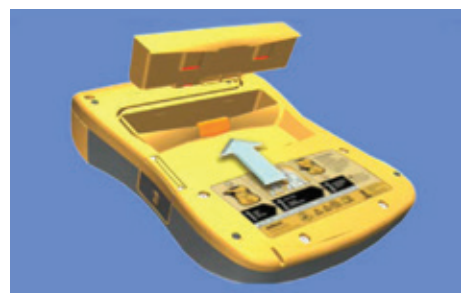

Defibtech og Mediq Norge AS

Defibtech har nå levert over 160,000 defibrillatorer til et globalt marked. Markedsposisjonen styrkes av prisvinnende design, solide produkter, enkelt vedlikehold og alt dette til en riktig pris.

Mediq Norge AS er eksklusiv importør av alle Defibtech hjertestartere i Norge og er en ledende leverandør av medisinsk forbruksmateriell og helsepleie produkter til offentlige og private institusjoner, legekontorer og alle landets sykehus.

En anskaffelse av Defibtech produkter fra Mediq Norge AS vil være et trygt valg.

Tlf.: 67 02 43 00

E-post: kundeservice.no@mediq.com

Internett: www.mediqnorge.no

Internett: www.hjertestart.no



Lifeline VIEW halvautomatisk Defibrillator

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

VARENUMMER MEDIO: 730675

DEFIBRILLATOR

TYPE

Ekstern halvautomatisk defibrillator

MODELL

DDU-2300 serien

BØLGEFORM

Bifasisk, trunkert, ekspotentiell (Impedanskompensert)

ENERGI

Voksen: 150 Joule

Barn: 50 Joule

(i en impedans på 50 ohm)

KNAPPER

Belyst On/Off knapp

Belyst sjokk knapp

LADETID*

Mindre enn 4 sekunder

(fra sjokkavgjørelse til sjokk)

SKJERM

Høy-oppløselig farge LCD

VIDEO MELDINGER

Full bevegelses video i farger

Løpende tekstmeldinger på

skjerm

HLR VEILEDNING

Video og stemmeveiledning

Videohjelp ved behov

STEMMEMELDINGER

Omfattende stemmeveiledning

som guider brukeren i bruk av

enheten

REDNINGSPROTOKOLL

NRR 2010 og Norsk språk.

Støtter protokoll-oppdateringer av

brukeren (passord beskyttet)

*Normalt, med nytt batteri og 25° C

DEFIBRILLERINGS-/MONITORERINGSELEKTRODER

MODELL

Voksen: DDP-2001

Barn: DDP-2002 and DDP-2003

STØRRELSE**

Voksen: 77 cm²

Barn: 50 cm²

TYPE

Ferdig tilkoblede elektroder til engangsbruk ikke-polariserte, selvklebende elektroder med kabel og kontakt

**normalt, pr. elektrode

HENDESDOKUMENTERING

INTERN HENDESLØGG

Kritiske EKG segmenter og

hendelsesparametre blir registrert

(mer enn 60 minutter) og kan

lastes ned til en minnebrikke i AED

enheten

PC-BASERT HENDESLØGG- GJENNOMGANG

EKG med hendelsesmerket display,

og audio playback når tilgjengelig

FLYTTBAR LAGRING AV DATA

(Valgfritt) Opp til 30 timer med EKG

og hendelsesdata-lagring (ingen

audio) eller opp til 3 timer med

lydopptak aktivert (audio valg).

EKG og hendelsesdata lagres på

minnebrikke. Lengden på lagringen

er avhengig av den type

minnebrikke som velges.

USB PORT

Download av hendelseslogg og

vedlikeholds operasjoner

PASIENTANALYSE SYSTEM

PASIENTANALYSE

Vurderer automatisk pasient-

impedans for riktig elektrode-

kontakt. Monitorerer signalkvalitet

og analyserer pasient EKG for

sjokkbare/ikke sjokkbare rytmer

SENSITIVITET / SPESIFIKASJON

Møter AAMI-DF-80

spesifikasjoner og er satt opp

etter NRR anbefalinger

BATTERIPAKKEN

MODELL

DBP-2003 (standard),

DBP-2013 (luftfart; TSO C-142a)

KAPASITET*

125 sjokk eller 8 timer

kontinuerlig bruk

POWER

12V, 2800 mAh

STANDBY TID*

4 år

TYPE

Lithium/Manganese Dioxide

Engangs, resirkulerbart, ikke

oppladbart

VARSEL FOR LAVT BATTERI

Synlig med lysvarsel

Lydvarsel med stemme

*Normalt, med nytt batteri og 25° C

SELVTESTER

AUTOMATISK

Automatisk, daglig, ukentlig og

månedlig kretstester

BRUKERINITIERT

Test av AED enheten og batteriet

kan også initieres av brukeren

BATTERI

Helhetstest på systemet når

batteriet settes inn i enhet

STATUSINDIKASJON

Synlige og hørbare

indikasjoner på AED enhetens

status

ELEKTRODETILKOBLING

Tilkoblingen testes daglig

STATUS SKJERM

Resultater fra selvtest med

elektrode og batteri informasjon

(status og ut-dato)

MILJØ

TEMPERATUR

I bruk: 0 to 50°C (32 to 122°F)

Standby: 0 to 50°C (32 to 122°F)

RELATIV LUFTFUKTIGHET

I bruk / Standby: 5%–95%

(ikke kondenserende)

HØYDE

-150 til 4500 m (500 til 15,000 ft)

Pr. MIL-STD-810F 500.4

Prosedyre II

VIBRASJON

Bakke (MIL-STD-810F 514.5

Kategori 20)

Helikopter (RTCA/DO-160D,

Seksjon 8.8.2, Kat R. Zone 2,

kurve G)

Jetfly (RTCA/DO-160D

Seksjon 8. Kat H, Sone 2,

Kurver B & R)

SLAG / FALL / STØT TOLERANSE

MIL-STD-810F 516.5 Prosedyre IV

1.2 meter (48 inches), på hvert

hjørne, kant eller flate, i standby

modus

KNUSE TEST

450 kg (1,000 pounds)

MOTSTAND MOT STØV / VANN

IEC 60529 klasse IP55;

Sprutsikker, støv beskyttet

(Batteri pakken installert)

ESD

IEC 61000-4-2: (Friluft opp til

15kV eller direkte kontakt opp til

8kV)

EMC (Emisjon)

CISPR 11 Gruppe 1 Nivå B

og FCC Del 15

EMC (Immunitet)

IEC 61000-4-3 og IEC 61000-4-8

MÅL / VEKT

STØRRELSE

18.5 x 24 x 5.8 cm

(7.3 x 9.5 x 2.3 Inches)

VEKT (med batteri)

Mindre enn 1.4 kg (3 lbs)



Lifeline VIEW er
godkjent av FDA og FAA

Spesifikasjoner kan endres uten varsel